


Gasversorgungsschläuche

Standardware und Sonderanfertigungen



Seit 2002 fertigen wir in unserem Haus Anschlusschläuche für die medizinische Patientenversorgung. Alle Schläuche werden direkt nach Auftragseingang gefertigt und stehen dann kurzfristig zur Verfügung. Unser umfangreiches Standardprogramm wird durch kundenspezifische Sonderbauten ergänzt. Aufgrund unseres umfangreichen Teilelagers können wir auch Sonderbauten kurzfristig zur Verfügung stellen.

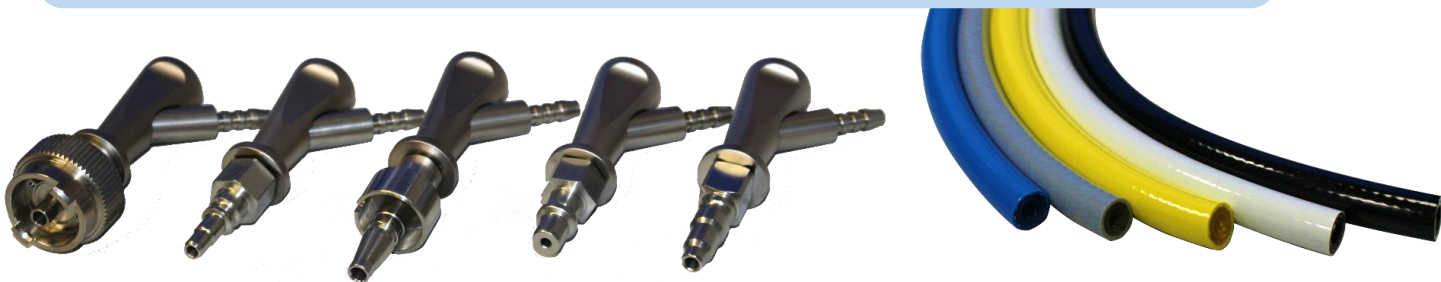

Sicherheitsmerkmale für Patient und Anwender:

Geräteart: nicht elektrisch betrieben
 Funktionsweise: mechanisch
 Industriestandard: DIN EN ISO 11195:2018
 CE-Zeichen/Nummer: 13485:2016 zertifiziert



Schlauchmaterial:

Medizingaseschlauch nach EN ISO 5359. Fünfschichtiger Schlauch aus Weich-PVC mit Gewebeeinlage aus Polyester von hoher Festigkeit. Antistatisch und wärmebeständig.

| Innendurchmesser | Außendurchmesser | Wandstärke | Druckfestigkeit | Gewicht |
|------------------|------------------|------------|-----------------|---------|
| 6,3 mm | 12,4 mm | 3,0 mm | 15 bar | 106 g/m |

Lieferbare Standards:

Deutsch (DIN), Französisch (NF), Britisch (BS), Skandinavisch (SS, AGA), Schweiz (CH, Carbamed), Italien (UNI).

Lieferbare Gasarten:

Sauerstoff (O₂), Luft (AIR), Lachgas (N₂O), Kohlenstoffdioxid (CO₂), Vakuum (VAC), Druckluft (AIR8)

WE THINK IN PRESSURE & FLOW